



cooltech

Keep your body fit and healthy

Straight HP

Curved HP

Tight HP

Double HP

Oval HP

Tiny HP



 **COCOON**
MEDICAL

cooltech

Remodelación corporal completa

cooltech® está diseñado para tratar grasa localizada en múltiples zonas del cuerpo. Dispone de diferentes aplicadores diseñados para adaptarse a todas las zonas corporales permitiendo realizar una remodelación general completa de la figura.

Máxima seguridad

cooltech® cuenta con numerosos estudios clínicos tanto "in vivo" como "in vitro" que certifican los mejores resultados en cuanto a seguridad de sus tratamientos. Su larga trayectoria asegura el máximo nivel de eficacia en eliminación de grasa.

Resultados visibles

Los tratamientos cooltech® han sido realizados en más de 1.000.000 de pacientes con más de un 95% de resultados satisfactorios. Los estudios clínicos realizados a nivel histológico avalan la degradación sistemática del tejido adiposo.



C. L. Casas
Paciente. Mujer de 43 años.
Zona tratada abdomen.

Mi experiencia con el tratamiento cooltech® ha sido muy buena. Es un tratamiento 100% eficaz para reducir la grasa localizada, en mi caso la reducción de volumen fue rápida desde la primera sesión. No es agresivo y no me causó dolor alguno.



J. D. Sarabia
Paciente. Hombre de 38 años.
Zona tratada flancos y abdomen.

El tratamiento fue mejor de lo esperado ya que me comentaron sobre la posibilidad de sentir cierta intensidad y dolor tras finalizarlo y realmente no fue así. Los resultados eran visibles al cabo de aproximadamente un mes y en las zonas tratadas realmente noté una disminución de volumen y estoy muy contento.



Crio adipolisis corporal completa
mediante congelación asistida.



cooltech

Keep your body fit and healthy

Innovación, conocimiento y desarrollo.

El procedimiento **cooltech®** trabaja mediante un mecanismo de acción basado en el principio de la vulnerabilidad de las células grasas (adipocitos) a cambios de temperatura ya que mediante la congelación del tejido adiposo se provoca una muerte celular controlada (apoptosis de los adipocitos).

El tratamiento **cooltech®** permite reducir la grasa subcutánea en múltiples zonas del cuerpo con la máxima seguridad.

El equipo **cooltech®** trabaja con un aplicador de vacío ajustable que actúa encapsulando en su interior el tejido graso de forma selectiva disminuyendo de forma controlada su temperatura produciendo así la apoptosis de las células grasas.

El tratamiento cooltech®

Está diseñado para esculpir y rediseñar la figura de forma integral, para conseguir este objetivo, **cooltech®** trabaja con diferentes aplicadores que se adaptan a todas las áreas corporales.

Todos los accesorios trabajan con una temperatura de hasta -8°C . La diferencia se debe a las temperaturas requeridas en las diferentes zonas de trabajo y el grosor de los pliegues de grasa.

El equipo **cooltech®** permite trabajar con dos accesorios a la vez optimizando así los tiempos de tratamiento y garantizando mejores resultados en cada sesión.



Indicado para pliegues de grasa superiores a 35mm.

Trabaja áreas como abdomen, cara interna de las rodillas, flancos, etc.

Straight HP



Indicado para pliegues de grasa superiores a 35mm y de larga longitud.

Diseñado exclusivamente para tratar la zona abdominal.

Double HP



Indicado para áreas de contornos curvos.

Trabaja áreas como pliegues de espalda, lateral de cintura, caderas, sub-glúteos, etc.

Curved HP



Indicado para pliegues de grasa superiores a 35mm en superficies amplias.

Trabaja áreas como parte superior del abdomen, flancos, cartucheras, bíceps femoral, etc.

Oval HP



Diseñado para pliegues de grasa menores de 35mm.

Trabaja áreas como la zona abdominal, sub-glúteos, espalda, caderas, etc.

Tight HP



Diseñado para pliegues de grasa menores de 35mm en zonas de áreas reducidas.

Trabaja áreas como, papada, brazos, sub-escapula, acúmulo sub-umbilical, etc.

Tiny HP

Nueva tecnología para garantizar la máxima seguridad y calidad.

C-PLAN seguimiento de paciente

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar el tratamiento **cooltech®** es la correcta realización del diagnóstico al paciente.


Este permitirá evaluar de forma correcta y objetiva la eficacia del tratamiento así como la evolución de los resultados.

cocoon medical ha desarrollado **C-PLAN**, una nueva APP para llevar a cabo el registro de paciente, monitorización de parámetros y seguimiento del tratamiento.

Objetivo del tratamiento

Los tratamientos **cooltech®** eliminan el tejido adiposo en múltiples zonas permitiendo una remodelación corporal completa. Es un tratamiento mayoritariamente indoloro, no invasivo y definitivo de eliminación de las células adiposas.

La tecnología diseñada por **cocoon medical** cuenta con más de 1.000.000 de tratamientos realizados en más de 40 países, además de diferentes estudios clínicos que demuestran su eficacia en todo tipo de pacientes con un altísimo grado de satisfacción.

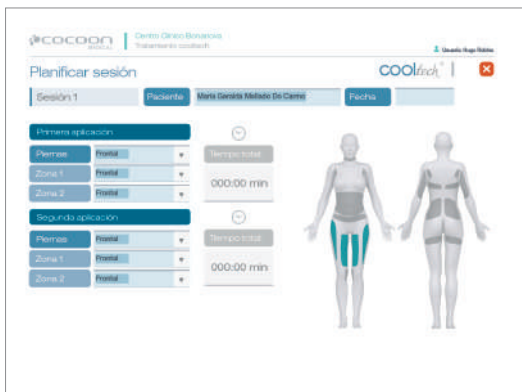

Programa de seguimiento de pacientes **cooltech®**



Zonas aptas para el tratamiento **cooltech®**

más de 1.000.000
de tratamientos
95% de pacientes satisfechos

Estudios clínicos continuados, resultados demostrados.

cocoon medical cuenta con un departamento de unidad clínica con el fin de garantizar la eficacia y la seguridad de todos los equipos cooltech del mercado.

Además, desde la unidad de seguimiento clínico y formación se comprueba la respuesta terapéutica de los equipos tanto *"in vitro"* como *"in vivo"*.

La continua colaboración entre el departamento clínico y el ámbito de I+D permiten una evolución constante de la tecnología

adaptándola a la creación de protocolos de aplicación en consulta más adecuados para la obtención de los mejores resultados garantizando así la efectividad y seguridad de todos los tratamientos.

El equipo **cooltech®** cumple con el certificado médico europeo CE0051, además de las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485, norma de calidad específica para productos sanitarios.



Aplicador utilizado: Double HP
Fecha: Julio 2015

Antes



6 semanas después
14 cm perdidos

Después



Aplicador utilizado: Curved HP
Fecha: Julio 2015

Antes




6 semanas después
6 cm perdidos

Después




Aplicador utilizado: Straight HP
Fecha: Julio 2015

Antes

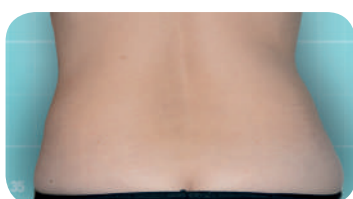


8 semanas después
6 cm perdidos

Después

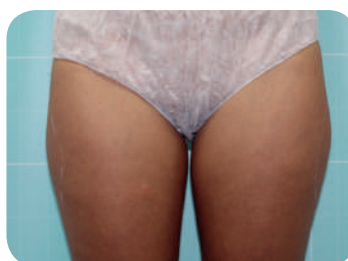

Aplicador utilizado: Oval HP
Fecha: Julio 2015

Antes

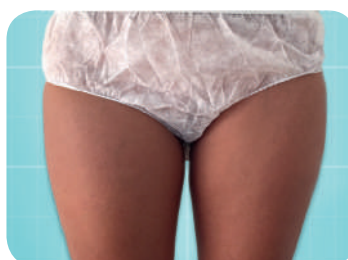

6 semanas después
4 cm perdidos

Después



características técnicas

funcionamiento básico

tipo de equipo	Equipo de frío controlado para uso médico
----------------	---

características técnicas

temperatura mínima aplicadores	- 8°C Straight HP , Curved HP , Tight HP Double HP , Tiny HP , Oval HP
--------------------------------	--

alimentación

alimentación	Red monofase, 100-240V
potencia máxima	1000W
potencia de enfriamiento en cada cabezal	90W programando 0°C con una Tamb de 25°C

regulaciones

clase del equipo según norma IEC 60601-1:2005	Clase I, tipo BF
clasificación según directiva 2007/47/CE	Clase II a
marcaje	CE0051
el equipo cumple con los requisitos de la directiva	Directiva 2007/47 CE (93/42/CE) (Producto sanitario) Directiva 2002/95 CEE (RoHS) Directiva 2002/96 ECC (RAEE)
patente propia	EP-12382287

características físicas

dimensiones	540x440x550mm
peso	39 kg
pantalla	Pantalla táctil 10,4"



feeling the innovation

www.cocoonmedical.com



T. 957 607 626
Movil: 659 363 539
e-mail: info@casbell.es



Follow us on:



MKT-05-V1/20161117